

DIRECTIVES D’ENTRETIEN PAR L’UTILISATEUR

ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL DE MICRODERMABRASION^{MD} TRUE GLOW

1. Après chaque utilisation, essuyer l’appareil à l’aide d’un chiffon humide pour éliminer les huiles et les lotions utilisées pendant le traitement. S’assurer que les contacts de charge de l’appareil de microdermabrasion sont propres.

2. Nettoyer l’appareil après chaque utilisation pour éviter l’accumulation d’huile et de lotions. Les contacts à 2 broches doivent être propres pour que l’appareil se charge correctement.

3. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation aux fins de désinfection en le rinçant à l’eau chaude savonneuse pour aider à éliminer l’accumulation d’huile et de lotion. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien. Essuyer l’appareil au moyen d’un linge sec et le ranger dans sa boîte ou dans un endroit propre et sec.

4. Ne pas nettoyer l’appareil au lave-vaisselle.

GUIDE DE DÉPANNAGE

L’APPAREIL DE MICRODERMABRASION NE SE CHARGE PAS	<p>1. S’assurer que les contacts de l’appareil et du câble de charge sont propres.</p> <p>Consulter les directives d’entretien par l’utilisateur pour savoir comment nettoyer l’appareil.</p> <p>2. S’assurer que l’appareil est bien branché.</p> <p>3. Vérifier la prise et s’assurer que l’appareil est sous tension. La plupart des prises de salle de bain sont munies d’un bouton de test et de réinitialisation. Appuyer sur le bouton de réinitialisation et vérifier de nouveau la prise.</p>
LE TÉMOIN DE CHARGE NE CLIGNOTE PAS.	<p>Vous devez maintenir le bouton MARCHE/ARRÊT enfoncé pendant plus de 1 seconde pour éteindre l’appareil.</p>
LES ACCESSOIRES TOMBENT DE L’APPAREIL PENDANT L’UTILISATION.	<p>S’assurer que les accessoires sont bien fixés.</p>
L’APPAREIL DE MICRODERMABRASION NE S’ÉTEINT PAS.	<p>Vous devez maintenir le bouton MARCHE/ARRÊT enfoncé pendant plus de 1 seconde pour éteindre l’appareil.</p>
LES ACCESSOIRES TOMBENT DE L’APPAREIL PENDANT L’UTILISATION.	<p>S’assurer que les accessoires sont bien fixés.</p>

6. Débrancher l’appareil avant de le nettoyer.

7. Ne pas recharger l’appareil si le fil d’alimentation ou la fiche est endommagé, s’il ne fonctionne pas correctement, s’il a été échappé par terre ou endommagé, ou s’il est tombé dans l’eau.

8. Ne pas placer le câble de charge ni le ranger dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un lavabo.

9. Ne pas immerger le câble de charge dans l’eau ou dans tout autre liquide.

10. Si le câble de charge tombe dans l’eau ou dans un autre liquide, débrancher immédiatement l’appareil.

12. Cet appareil ne convient pas aux enfants.

13. Ne pas tirer sur le fil, le tordre, ni l’enrouler autour de l’appareil.

14. Ne jamais laisser tomber ni insérer un objet dans une ouverture de l’appareil.

15. CET APPAREIL EST RÉSERVÉ À UN USAGE DOMESTIQUE.

16. Ne pas laisser l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché. Le débrancher de la prise quand il n’est pas utilisé et avant de le nettoyer.

17. Ne pas débrancher l’appareil en tirant sur le fil. Pour débrancher l’appareil, tirer sur la fiche et non sur le fil.

18. Ne pas manipuler la fiche ou l’appareil lorsque vos mains sont mouillées.

19. NMB-3(B).

MISE EN GARDE –

1. N’utiliser l’appareil que dans un endroit sec. Ne pas l’exposer à du liquide, à de la vapeur ou à de la pluie.

2. S’assurer que le câble est branché sur l’appareil avant de brancher le câble de charge USB sur la prise.

3. Ne pas utiliser l’appareil si son fil d’alimentation ou son boîtier est endommagé.



RETRAIT DE LA PILE

1. À l’aide d’un petit tournevis cruciforme, retirer les vis sur le devant de l’appareil.
2. Enlever le panneau de commande et enlever la pile. Apporter la pile au centre de collecte le plus proche pour qu’elle soit éliminée de façon appropriée. NE PAS jeter la pile avec les ordures ménagères courantes.

CONTIENT UNE PILE AU LITHIUM-ION. CELLE-CI DOIT ÊTRE COLLECTÉE, RECYCLÉE OU ÉLIMINÉE DE FAÇON APPROPRIÉE. NE PAS JETER AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES. GARDER L’APPAREIL LOIN DE L’EAU.

TOUJOURS DÉBRANCHER LES PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES.

RBRC^{MC} est une marque de commerce de la Rechargeable Battery Recycling Corporation. La pile est scellée à l’intérieur de l’appareil de microdermabrasion True Glow^{MD}, de sorte qu’il est difficile de la retirer pour la recycler. L’appareil de microdermabrasion True Glow^{MD} doit être retourné en entier lors du recyclage de la pile.

MISE EN GARDE : Toute modification non expressément approuvée par Conair Corporation, fabricant de ce produit et responsable de la conformité, pourrait annuler le droit de l’utilisateur de se servir de l’appareil.

Appareil de microdermabrasion True GlowMD avec accessoires

4. Débranchez toujours l’appareil avant de le nettoyer, et quand il n’est pas utilisé.

5. S’assurer que la prise est de la tension appropriée avant de brancher l’appareil. Tension nominale d’entrée de 5V CC, 200 mA.

La poignée, le chargeur et le câble de l’appareil de microdermabrasion True Glow^{MD} ne contiennent aucune pièce pouvant être réparée. Si le fil du chargeur est endommagé, il faut le débrancher et le remplacer.

Appelez au 1-855-926-6247 pour savoir comment vous procurer des têtes de brosse de recharge.

CONSERVER CES CONSIGNES

SENSIBILITÉ ET PRÉCAUTIONS

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR LES ZONES DÉLICATES

L’appareil de microdermabrasion True Glow^{MD} élimine délicatement la saleté et le maquillage de vos pores sans irriter la peau et elle donne à celle-ci une apparence saine! Si vous croyez avoir une peau très sensible, veuillez consulter votre médecin avant d’utiliser cet appareil. Nous recommandons de commencer l’utilisation de l’appareil en mode de basse vitesse, et d’augmenter progressivement la vitesse selon la réaction de la peau au traitement. En cas d’éruption ou d’irritation, cessez l’utilisation. Nous recommandons de ne pas partager l’appareil.

Si l’utilisation de l’appareil vous cause de la douleur ou de l’inconfort, cessez de l’utiliser et consultez votre médecin.

GARANTIE LIMITÉE DE UN ANS (ÉTATS-UNIS ET CANADA SEULEMENT)

Conair, à son choix, réparera ou remplacera le produit sans frais au cours des 12 mois suivant la date d’achat, si le produit présente un vice de matériau ou de fabrication.

Pour obtenir un service au titre de la présente garantie, retourner le produit défectueux au centre de service le plus près (voir la liste au verso). A défaut de présenter un reçu d’achat, la période de garantie sera de 12 mois à compter de la date de fabrication.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE APPLICATION PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE 12 MOIS DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE. CONAIR NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT OU FORTUIT QUE CE SOIT RÉSULTANT D’UNE VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE.

Cette garantie vous accorde des droits légaux particuliers et peut vous accorder d’autres droits qui varient d’une province à l’autre.

Appareil de microdermabrasion True GlowMD avec accessoires

1. Avant la première utilisation, l’appareil de microdermabrasion doit être entièrement chargé pendant 2,5 à 3,5 heures.

Brancher le fil d’alimentation sur une prise murale et brancher le connecteur CC sur l’arrière de l’appareil. La DEL blanche s’allume pour indiquer

que l’appareil est en cours de charge.

Cela est normal.

2. Afin de maintenir la capacité optimale de la pile rechargeable, l’appareil de microdermabrasion devrait recevoir une charge complète de 2,5 à 3,5 heures tous les 3 mois.

3. Le voyant BLANC clignotera pendant 5 secondes, puis s’éteindra lorsque l’appareil atteindra une faible capacité de pile pendant son fonctionnement.

4. L’adaptateur peut devenir chaud en cours de charge. Cela est normal.

5. Afin de maintenir la capacité optimale de la pile rechargeable, l’appareil de microdermabrasion devrait recevoir une charge complète de 2,5 à 3,5 heures tous les 3 mois.

6. Débrancher l’adaptateur du mur et le câble lorsque l’appareil n’est pas utilisé. Ne pas débrancher l’adaptateur du mur lorsqu’il est encore raccordé à l’appareil. Cela provoquerait la décharge de la pile.


7. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

8. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.



GARDEZ L’APPAREIL LOIN DE L’EAU.

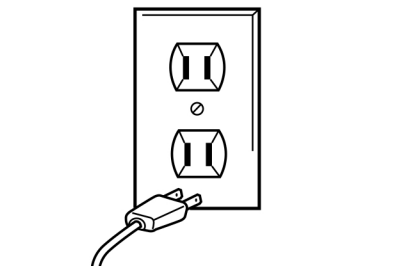

Tout le monde sait que l’eau et l’électricité ne font pas bon ménage. Mais saviez-vous qu’un appareil électrique est sous tension même quand il est éteint?

Si la fiche est branchée, l’appareil est sous tension. C’est pourquoi vous devez débrancher l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas.

DÉBRANCHEZ TOUJOURS LES PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES.

Appareil de microdermabrasion True GlowMD avec accessoires

1. Avant la première utilisation, l’appareil de microdermabrasion doit être entièrement chargé pendant 2,5 à 3,5 heures.

Brancher le fil d’alimentation sur une prise murale et brancher le connecteur CC sur l’arrière de l’appareil. La DEL blanche s’allume pour indiquer

que l’appareil est en cours de charge.

Cela est normal.

2. Afin de maintenir la capacité optimale de la pile rechargeable, l’appareil de microdermabrasion devrait recevoir une charge complète de 2,5 à 3,5 heures tous les 3 mois.

3. Le voyant BLANC clignotera pendant 5 secondes, puis s’éteindra lorsque l’appareil atteindra une faible capacité de pile pendant son fonctionnement.

4. L’adaptateur peut devenir chaud en cours de charge. Cela est normal.

5. Afin de maintenir la capacité optimale de la pile rechargeable, l’appareil de microdermabrasion devrait recevoir une charge complète de 2,5 à 3,5 heures tous les 3 mois.

6. Débrancher l’adaptateur du mur et le câble lorsque l’appareil n’est pas utilisé. Ne pas débrancher l’adaptateur du mur lorsqu’il est encore raccordé à l’appareil. Cela provoquerait la décharge de la pile.

7. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

8. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

9. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

10. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

11. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

12. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

13. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

14. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

15. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

16. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

17. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

18. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

19. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

20. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

21. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

22. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

23. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

24. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

25. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

26. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

27. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

28. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

29. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

30. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

31. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

32. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

33. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

34. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

35. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

36. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

37. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

38. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

39. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

40. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

41. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

42. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

43. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

44. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

45. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

46. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

47. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

48. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

49. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

50. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

51. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

52. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

53. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

54. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

55. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

56. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

57. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

58. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

59. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

60. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

61. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

62. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

63. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

64. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

65. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

66. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

67. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

68. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

69. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

70. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

71. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

72. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

73. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

74. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

75. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

76. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

77. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

78. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

79. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

80. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

81. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

82. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.

83. Nettoyer la tête et l’appareil après chaque utilisation au moyen d’alcool à friction ou de savon antibactérien.

84. Attendre de 6 à 7 jours entre les traitements.

NOTE : Ne pas passer plus de deux fois sur la même zone pendant le traitement.